

マニーオブサルミックナイフ  
**MANI® Ophthalmic Knife**

■ スリットナイフ (ショートヘッド)


Short head Slit Knife

アングル45°

6本入/箱

○主な用途：角膜切開 (クリアコーニア)・強角膜切開など

NEW

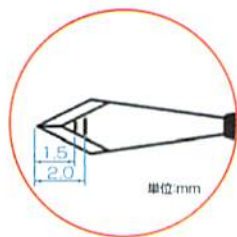

MSL  
Short-Head  
(ライン入り)



実物大

品名	品番
スリット・アングル付 2.0mm (ショートヘッド)	MSL20SH
スリット・アングル付 2.1mm (ショートヘッド)	MSL21SH
スリット・アングル付 2.2mm (ショートヘッド)	MSL22SH
スリット・アングル付 2.3mm (ショートヘッド)	MSL23SH
スリット・アングル付 2.4mm (ショートヘッド)	MSL24SH
スリット・アングル付 2.5mm (ショートヘッド)	MSL25SH
スリット・アングル付 2.65mm (ショートヘッド)	MSL26SH
スリット・アングル付 2.75mm (ショートヘッド)	MSL27SH
スリット・アングル付 2.8mm (ショートヘッド)	MSL28SH
スリット・アングル付 2.9mm (ショートヘッド)	MSL29SH
スリット・アングル付 3.0mm (ショートヘッド)	MSL30SH

従来品との比較




★切れ味、操作性、視認性を極めて


ショートヘッドナイフは従来の究極の切れ味のまま、アングルから先を2mm短くしたことにより、操作性を高めました。これにより奥眼や眼裂の狭い方へも有効に使用できるほか、開瞼器、ドレープとの接触防止にもつながります。また、先端から1.5mm、2.0mm部にラインを入れたことで、トンネル作成時の操作性がアップしました。

※MSL20~24SH= (8mm→6mm) MSL25~30SH= (9mm→7mm)


★マーキングの使用例

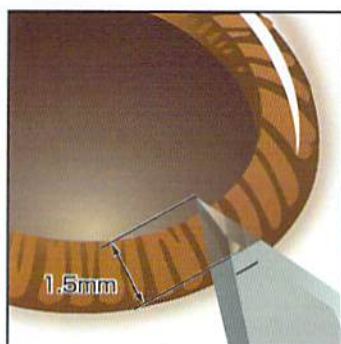

角膜切開

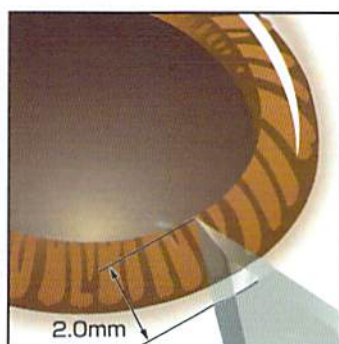

強角膜切開

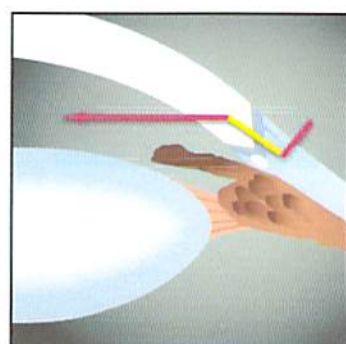

ラインを目安に前房へ穿孔

マニーオフサルミックナイフ  
**MANI® Ophthalmic Knife**

■ ストレートナイフ Straight Knife

6本入/箱

○主な用途：強膜半層切開、サイドポート作成など




MST



実物大

品名	品番
ストレート 0°	MST00
ストレート 15°	MST15
ストレート 22.5°	MST22
ストレート 30°	MST30
ストレート 45°	MST45

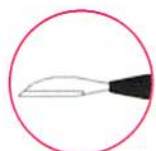

ストレート0°

■ ストレートナイフ (マーキング付) Marking Straight Knife

6本入/箱

○主な用途：強膜半層切開、サイドポート作成など

**NEW**



単位:mm

MST (マーキング付)

サイドポート幅の目安となるラインを1.0mm、1.2mm部に入れたことで、より操作性が向上しました。



実物大

品名	品番
ストレート 15° (マーキング付)	MST15MK
ストレート 22.5° (マーキング付)	MST22MK

■ ストレートナイフ (セーフティ) Safety Straight Knife

6本入/箱

○主な用途：強膜半層切開、サイドポート作成など



MST Safety



実物大

品名	品番
ストレート 15° (セーフティ)	MST15SK
ストレート 22.5° (セーフティ)	MST22SK
ストレート 30° (セーフティ)	MST30SK

※セーフティナイフの取扱い方法については、裏表紙に記載されています。