

バラツケ開瞼器

ブレードで睫毛をカバーします。

検査・処置や診察など全般で使用できます。



【サイズ】全長：42mm/開瞼部：13mm
※本品は未滅菌です。

コード：T-09000
TMI-SP13S-021 バラツケ開瞼器 (5個/1袋)
標準価格：¥12,500- (税別)
製造販売届出番号：11B2X00040000511

TMI 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座1丁目2番10号

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913


E-Mail:info@tmi-st.com <http://www.tmi-st.com>

クラッツ／バラツケ 開瞼器

軽量で、眼球への圧迫も少なく、汎用性の高いワイヤー開瞼器です。



Made in JAPAN

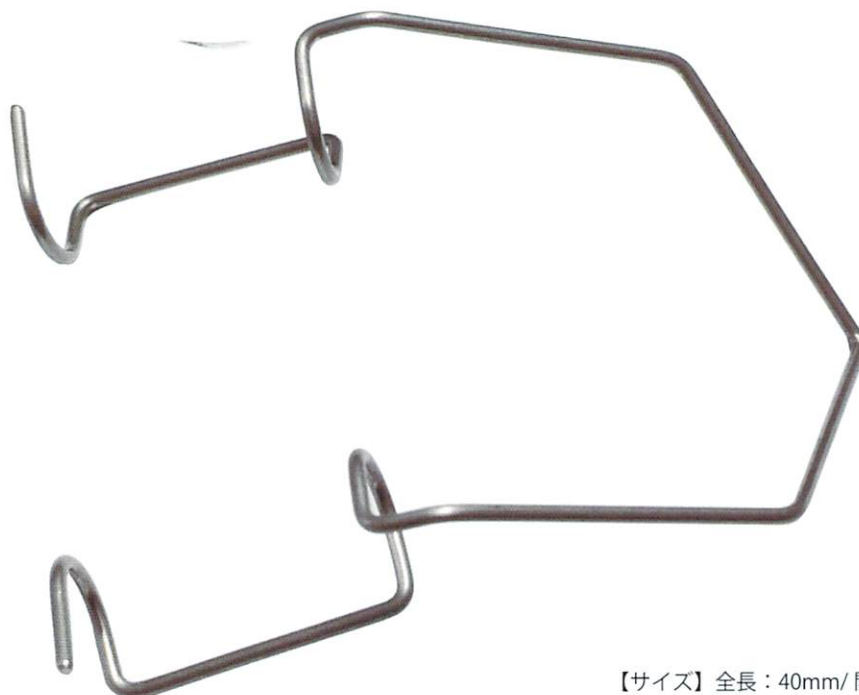

【サイズ】全長：40mm/ 開瞼部：13mm
※本品は未滅菌です。

コード：T-TMISP031

商品名：TMI-SP031 クラッツ／バラツケ開瞼器（5 個入り）

標準価格：¥3,500-（税別）

TMI 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1 丁目 2 番 10 号

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913


E-Mail:info@tmi-st.com <http://www.tmi-st.com>

小島式開創器 (釣針型眼窩開創フック)

切開部位を任意の方向に開創し牽引固定する開創器です。




Made in JAPAN

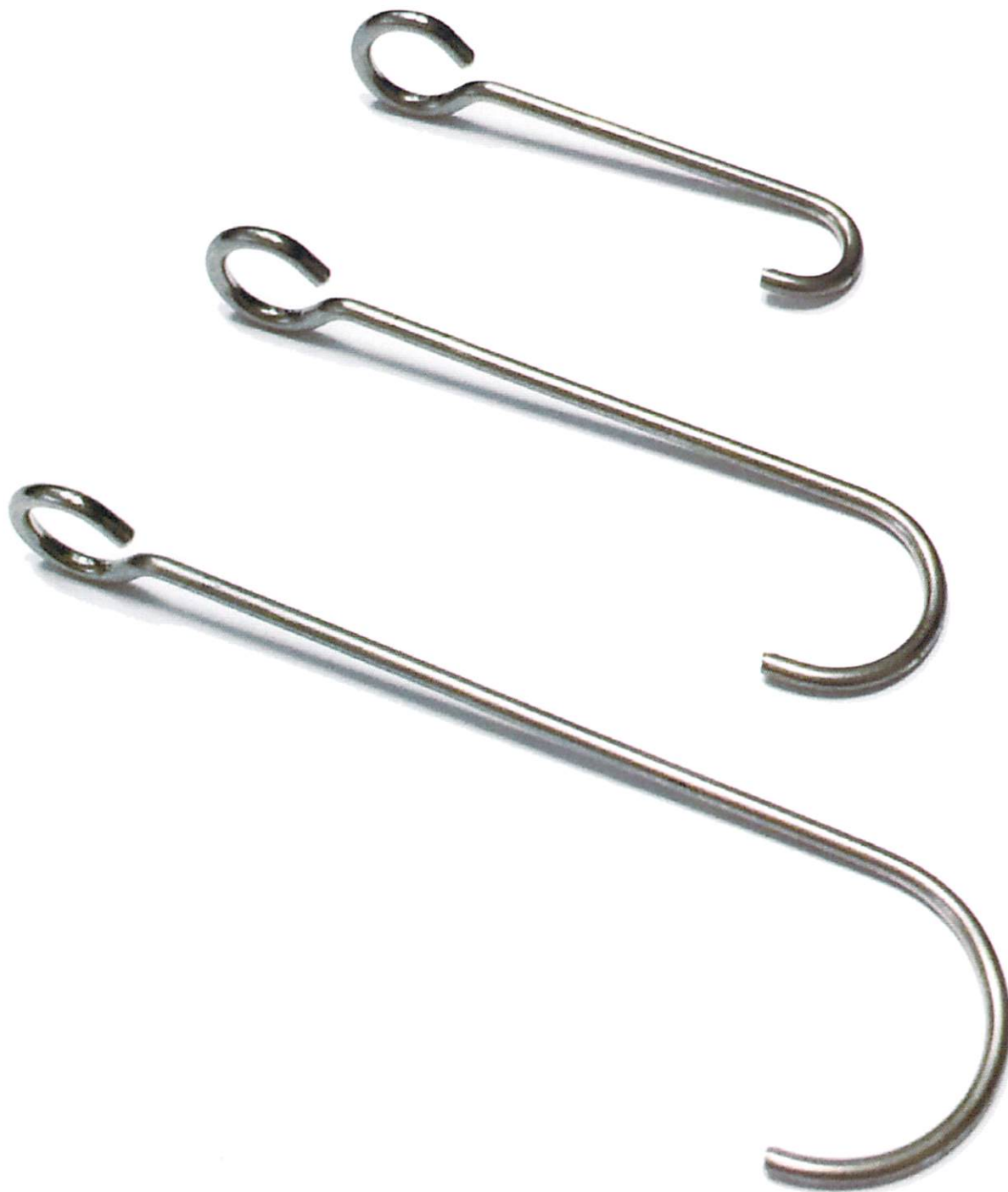


眼腫瘍による手術において、眼窩腫瘍又は眼瞼腫瘍の摘出時、切開後の切開部位を任意の方向に開創し、牽引固定するために開発されたものです。

小島式開創器（釣針型眼窩開創フック）は、釣針型フックの制御糸を付ける部分が丸い鉤状になっており、ループを簡単にかけることができます。よって、短時間でのセッティングとリムーブが可能です。また、開創部の組織を傷付けることのないように、フックの先端は丸く加工しております。

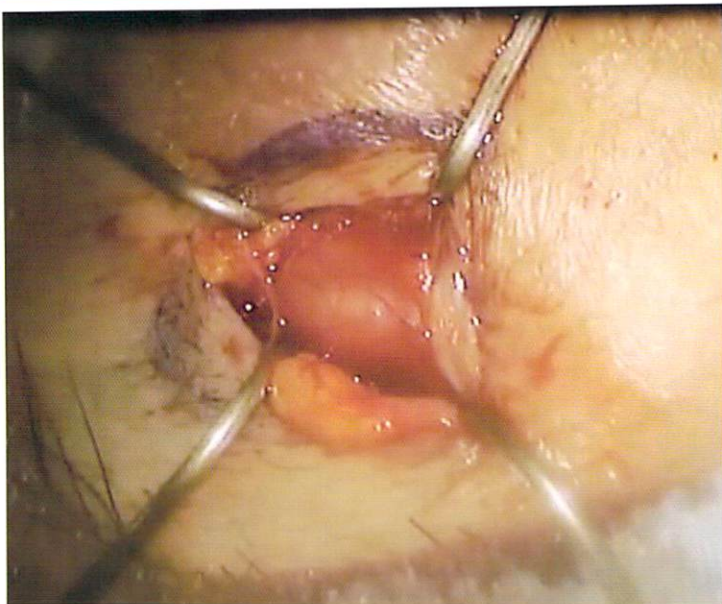


- ドレープへのループの固定はクレンメ、モスキートペアン、布鉗子等で行ってください。
- 弾性素材のループなので、術中に本器の移動が簡単に行えます。

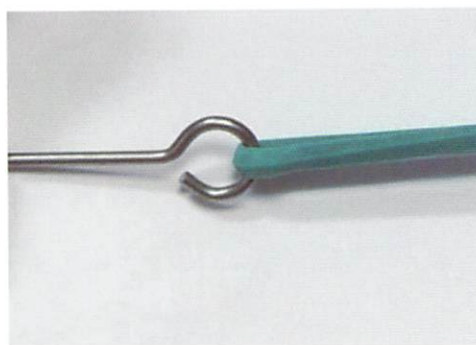


開創部位の範囲に応じて、牽引固定ができるように、サイズが大・中・小と3タイプあります。

サイズは3タイプ

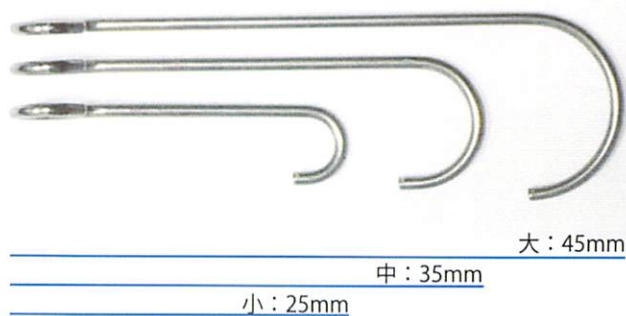

熱にも薬品にも強い素材を採用しており、オートクレーブが可能です。

ループ

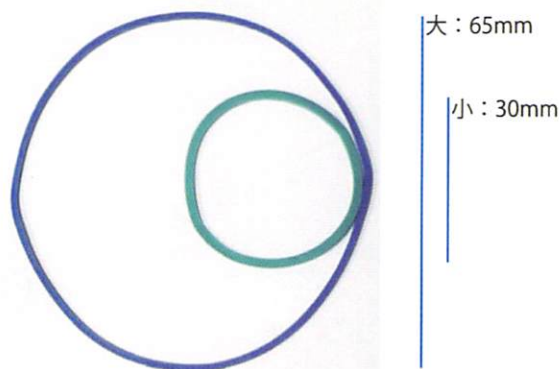

※サイズは内径です

商品コード	商品名	内容	標準価格
T-08001	小島式開創器（釣針型眼窩開創フック）大	小島式開創器大 × 1 個、小島式開創器用弾性ループ大 × 2 個	4,000 円（税別）
T-08011	小島式開創器（釣針型眼窩開創フック）中	小島式開創器中 × 1 個、小島式開創器用弾性ループ小 × 2 個	4,000 円（税別）
T-08021	小島式開創器（釣針型眼窩開創フック）小	小島式開創器小 × 1 個、小島式開創器用弾性ループ小 × 2 個	4,000 円（税別）
T-08762	小島式開創器用弾性ループ大（10 個 / 1 袋）		500 円（税別）
T-08768	小島式開創器用弾性ループ小（10 個 / 1 袋）		500 円（税別）

販売名：小島式開創器：製造販売届出番号：11B2X00040000505

TMI 株式会社 テイエムアイ

〒352-0006 埼玉県新座市新座 1 丁目 2 番 10 号

Tel:048-481-2501 Fax:048-481-9913

E-Mail:info@tmi-st.com http://www.tmi-st.com