
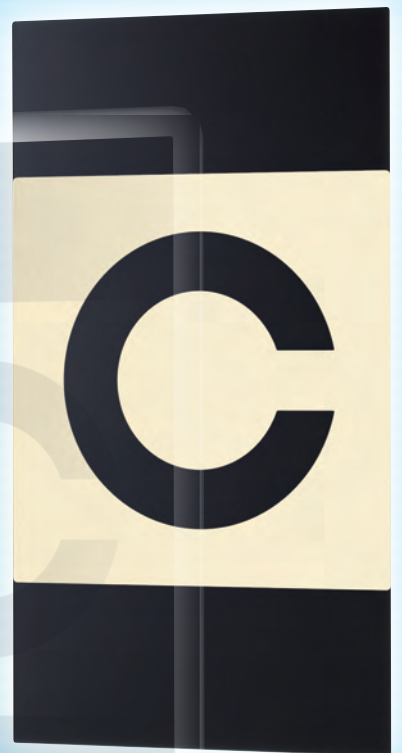
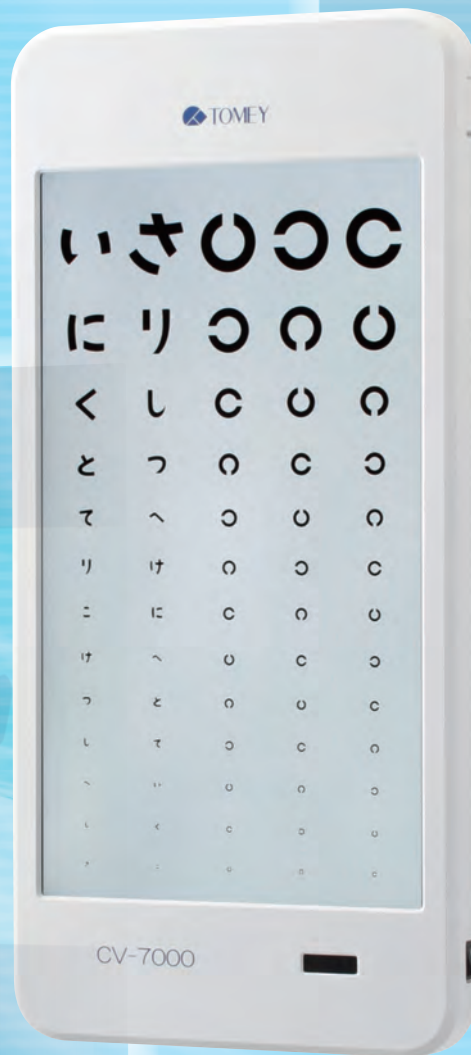



液晶字づまり視力検査器

CV-7000

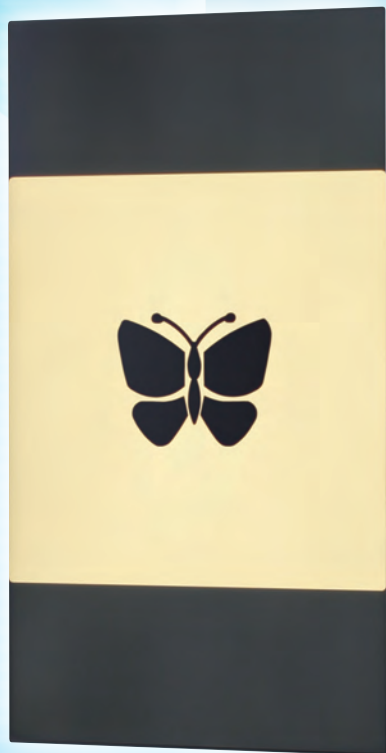

液晶字づまり視力検査器

CV-7000

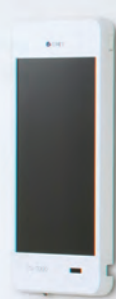

スタンダードに新しい風を

検査のひと手間を省くオールラウンド視力表

Q 小児・高齢者に合わせて、
字づまり・字ひとつ2つの視力表を
使い分けた経験はありませんか？

字づまり・字ひとつの
2通りの視標が表示可能です

大型液晶パネル(27インチ)を採用し、被検者にあわせ、
字ひとつ検査、字づまり検査を選択いただけます。

Q 低視力検査に時間を
おかけではありませんか？




少数視力値0.03から
2.0まで表示可能です

検者が移動することなく、低視力検査をすることができ
ます。また被検者に周りの目を気にすることなく、安心して
検査を受けていただけます。

Q 検査室のレイアウトに不自由を
経験されたことはありませんか？

検査距離を標準5m、4m、
3m、2.5mから設定可能です

検査距離を4段階に設定可能なので、検査室のレイアウト
に合わせ、お選びいただけます。

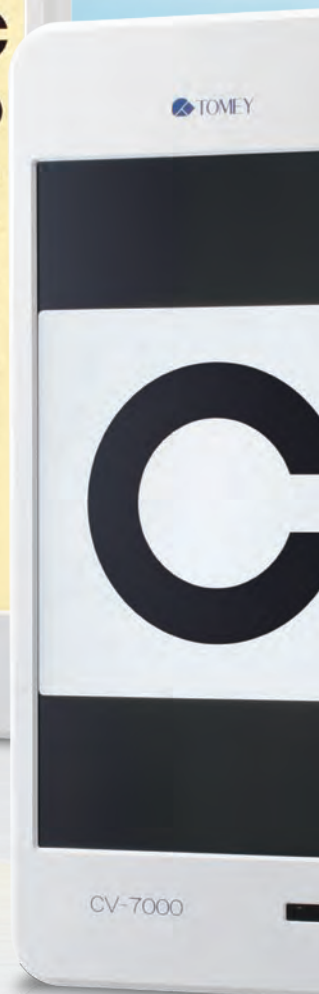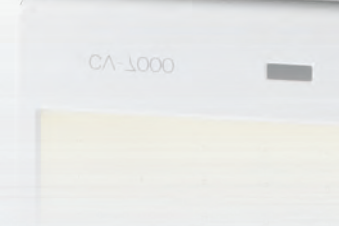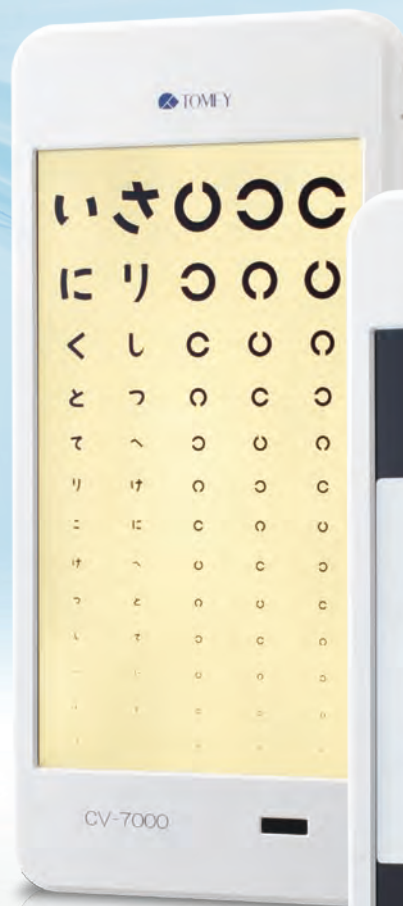




Q 必要な検査に対し適切な視標がなく
お困りではありませんか？

20種類の特種視標と 低コントラスト視標が表示可能です

字づまり、字ひとつだけでなく、様々な視標を簡単に表示させる
ことができます。

視標は、シートの交換により容易に変更できます。

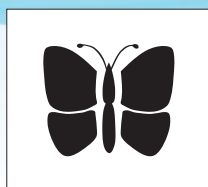

絵視標


小児の視力検査に
有用です。



(例:25%)


コントラスト視標

術前術後の視機能の
経過観察に有用です。

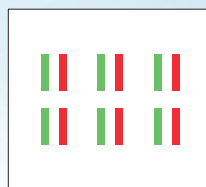

三桿計

二種免許、大型免許等
で必須の検査です。

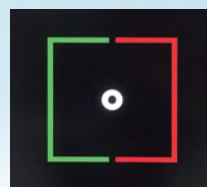

不等像視

左右眼の見え方の違い
を確認できます。

Q お使いのコントローラーに不自由を
感じられたことはありませんか？

直観的な操作可能な コントローラーです

コントローラーは、自照式・大きな視標マーク・凸版印刷で、
視認性と操作性を兼ね備えています。表示する視標の確認を
行いやすく、ブラインドタッチをサポートします。

検者が検査結果をカルテに記載する際に、両手が自由になる
ようにコントローラースタンドを採用しました。検査のちょっと
した煩わしさを省きます。




仕 様

表 示	27インチWQHD液晶
検 査 距 離	5m、4m、3m、2.5m
視 力 チャート 種 類	ランドルト環、ひらがな、小児用絵
視 力 チャート 表 示	字づまり方式／字ひとつ方式
視力値・検査値表示方法	少数、logMAR
特 殊 チャート 種 類	放射線、くさび形放射線、点群、点群三角、レッドグリーン、 固視点、両眼バランス、両眼レッド・グリーン、三桿計チャート、 立体視、精密立体視、十字斜位、固視点付き十字斜位、 回旋斜位、クロスリング、不等像視、ウォース4点、 水平斜位、上下斜位

本 体	
通 信 方 式	赤外線
電源／消費電力	AC100V／50/60Hz／45VA
寸 法 ／ 重 量	399mm(W)×845mm(H)×47mm(D)／9kg
赤外線コントローラー	
電 源 電 圧	DC6V(単3乾電池8本)
寸 法 ／ 重 量	156mm(W)×258mm(H)×32mm(D)／480g(乾電池含まず)

*専用架台はオプションになります。*コントローラースタンドは本体に含みます。

寸法図

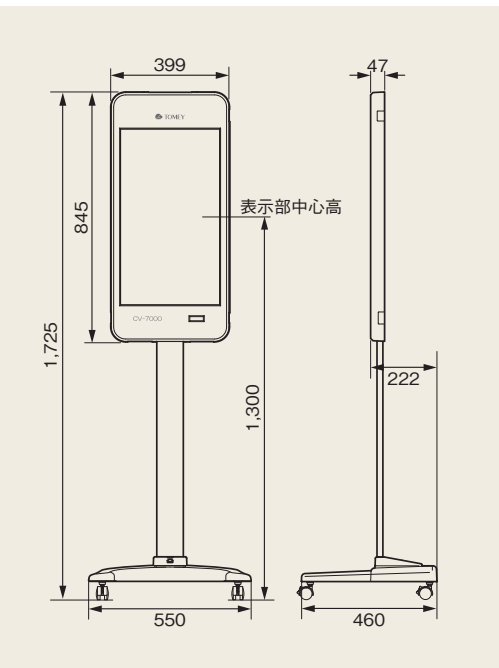

標 準

0.03	こ	し	の	う	っ
0.04	さ	く	う	っ	っ
0.05	く	り	っ	っ	っ
0.06	て	つ	っ	っ	っ
0.07	り	と	っ	っ	っ
0.08	へ	に	っ	っ	っ
0.09	け	い	っ	っ	っ
0.1	に	て	っ	っ	っ
0.125	つ	こ	っ	っ	っ
0.15	い	さ	っ	っ	っ
0.2	に	り	っ	っ	っ
0.3	く	し	っ	っ	っ
0.4	と	つ	っ	っ	っ
0.5	て	へ	っ	っ	っ
0.6	り	け	っ	っ	っ
0.7	こ	に	っ	っ	っ
0.8	け	へ	っ	っ	っ
0.9	つ	と	っ	っ	っ
1.0	し	て	っ	っ	っ
1.2	へ	い	っ	っ	っ
1.5	し	く	っ	っ	っ
2.0	さ	こ	っ	っ	っ

1 型
(ランドルト環、ひらがな混在)

0.03	の	っ	っ	っ	っ
0.04	っ	っ	っ	っ	っ
0.05	っ	っ	っ	っ	っ
0.06	っ	っ	っ	っ	っ
0.07	っ	っ	っ	っ	っ
0.08	っ	っ	っ	っ	っ
0.09	っ	っ	っ	っ	っ
0.1	っ	っ	っ	っ	っ
0.125	っ	っ	っ	っ	っ
0.15	っ	っ	っ	っ	っ
0.2	っ	っ	っ	っ	っ
0.3	っ	っ	っ	っ	っ
0.4	っ	っ	っ	っ	っ
0.5	っ	っ	っ	っ	っ
0.6	っ	っ	っ	っ	っ
0.7	っ	っ	っ	っ	っ
0.8	っ	っ	っ	っ	っ
0.9	っ	っ	っ	っ	っ
1.0	っ	っ	っ	っ	っ
1.2	っ	っ	っ	っ	っ
1.5	っ	っ	っ	っ	っ
2.0	っ	っ	っ	っ	っ

2 型
(ランドルト環のみ)

0.03	に	へ	っ	っ	っ
0.04	こ	と	っ	っ	っ
0.05	し	こ	っ	っ	っ
0.06	い	り	っ	っ	っ
0.07	け	し	っ	っ	っ
0.08	く	さ	っ	っ	っ
0.09	つ	て	っ	っ	っ
0.1	り	く	っ	っ	っ
0.125	さ	に	っ	っ	っ
0.15	と	へ	っ	っ	っ
0.2	い	し	っ	っ	っ
0.3	て	つ	っ	っ	っ
0.4	へ	に	っ	っ	っ
0.5	く	こ	っ	っ	っ
0.6	さ	て	っ	っ	っ
0.7	し	と	っ	っ	っ
0.8	へ	け	っ	っ	っ
0.9	に	い	っ	っ	っ
1.0	け	り	っ	っ	っ
1.2	こ	へ	っ	っ	っ
1.5	つ	く	っ	っ	っ
2.0	り	さ	っ	っ	っ

3 型
(ランドルト環、ひらがな混在)

0.03	っ	っ	っ	っ	っ
0.04	っ	っ	っ	っ	っ
0.05	っ	っ	っ	っ	っ
0.06	っ	っ	っ	っ	っ
0.07	っ	っ	っ	っ	っ
0.08	っ	っ	っ	っ	っ
0.09	っ	っ	っ	っ	っ
0.1	っ	っ	っ	っ	っ
0.125	っ	っ	っ	っ	っ
0.15	っ	っ	っ	っ	っ
0.2	っ	っ	っ	っ	っ
0.3	っ	っ	っ	っ	っ
0.4	っ	っ	っ	っ	っ
0.5	っ	っ	っ	っ	っ
0.6	っ	っ	っ	っ	っ
0.7	っ	っ	っ	っ	っ
0.8	っ	っ	っ	っ	っ
0.9	っ	っ	っ	っ	っ
1.0	っ	っ	っ	っ	っ
1.2	っ	っ	っ	っ	っ
1.5	っ	っ	っ	っ	っ
2.0	っ	っ	っ	っ	っ

4 型
(ランドルト環のみ)

0.032 +1.5	っ	っ	っ	っ	っ
0.04 +1.4	っ	っ	っ	っ	っ
0.05 +1.3	っ	っ	っ	っ	っ
0.063 +1.2	っ	っ	っ	っ	っ
0.071 +1.15	っ	っ	っ	っ	っ
0.08 +1.1	っ	っ	っ	っ	っ
0.09 +1.05	っ	っ	っ	っ	っ
0.1 +1.0	っ	っ	っ	っ	っ
0.125 +0.9	っ	っ	っ	っ	っ
0.16 +0.8	っ	っ	っ	っ	っ
0.2 +0.7	っ	っ	っ	っ	っ
0.25 +0.6	っ	っ	っ	っ	っ
0.32 +0.5	っ	っ	っ	っ	っ
0.4 +0.4	っ	っ	っ	っ	っ
0.5 +0.3	っ	っ	っ	っ	っ
0.63 +0.2	っ	っ	っ	っ	っ
0.7 +0.16	っ	っ	っ	っ	っ
0.8 +0.1	っ	っ	っ	っ	っ
1.0 0	っ	っ	っ	っ	っ
1.25 -0.1	っ	っ	っ	っ	っ
1.6 -0.2	っ	っ	っ	っ	っ
2.0 -0.3	っ	っ	っ	っ	っ

5 型
(logMARランドルト環のみ)

0.03	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.04	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.05	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.06	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.07	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.08	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.09	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.1	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.125	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.15	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.2	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.3	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.4	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.5	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.6	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.7	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.8	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
0.9	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
1.0	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
1.2	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
1.5	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘
2.0	🐘	🐘	🐘	🐘	🐘

6 型
(小児用絵)

プロフェッショナルな情報はすべてここに

ADEPT+ 医療従事者向け情報サイト
TOMEY OPHTHALMOLOGY WEBSITE

アデプトのご案内

最新器械の使用評価やセミナーの動画、症例集やカタログの閲覧はこちらのサイトをご利用ください。

<http://ophth.tomey.co.jp>

※仕様・外観等は、予告なしに変更する場合があります。

販 売

株式会社 トーメーコーポレーション

〒451-0051 名古屋市西区則武新町二丁目11番33号
TEL (052) 581-5321 FAX (052) 581-5626
URL <http://www.tomey.co.jp>

製造販売

株式会社 タカギセイコー

〒383-8585 長野県中野市岩船330-2
TEL (0269) 22-4512 FAX (0269) 26-6321

ご用命は