

**TOPCON**

YOUR VISION. OUR FOCUS.



new

**KR-800PA**

オートケラトレフラクトメータ

## レフケラ+角膜マッピング

- » 角膜マッピング機能
- » 安定した屈折力測定
- » かんたん操作 3D オートアライメント
- » コンパクトデザイン
- » 視認性の高い大型タッチパネルモニター
- » シンプルで分かりやすいデータ表示





YOUR VISION. OUR FOCUS.

new

# レフケラ + 角膜マッピング


Enhanced kerato-refractometer  
with corneal shape data

## KR-800PA

オートケラトレフラクトメータ

### 角膜マッピング機能

角膜マッピング機能により角膜の曲率半径および角膜屈折力の分布を観察できます。屈折検査と併わせて角膜マッピングを行うことで、角膜形状異常を伴う角膜疾患の把握や全屈折との比較が可能です。

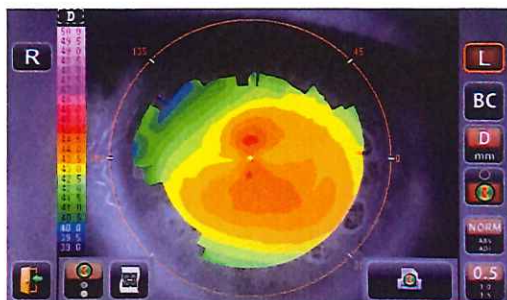

### かんたん操作


### 3D オートアライメント\*

XYZ 同時作動の 3D オートアライメント機能搭載により、アライメントしにくい微細な眼の動きも高速自動追尾<sup>\*2</sup>し、素早く正確にアライメントを行います。これによりスムーズなオート測定を可能にし、ワークフローの効率化を実現します。



### 安定した屈折力測定

トプコン独自のロータリープリズム測定方式を採用。網膜上に投影する測定リングを偏心回転させることで、高速で安定した測定結果を得ることができます。また、最小瞳孔径φ2mm（屈折力測定時）で瞳孔径の小さな眼でも測定可能です。

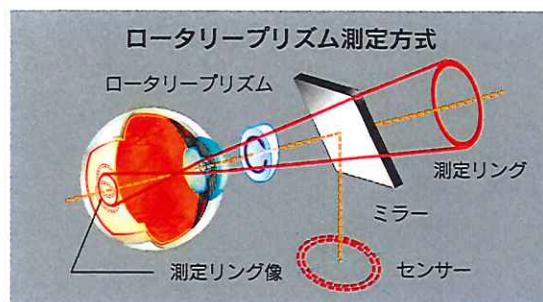

※イメージ

販売名：オートケラトレフラクトメータKR-800PA  
医療機器届出番号：13B1X00030KR800P



(株)トプコン本社



(株)トプコン本社



(株)トプコン本社

\*1 測定可能な範囲に手動で位置合わせすると自動で測定を開始するセミオートアライメントです。

\*2 被検眼によっては追尾しない場合があります。

※画面はハメコミ合成です。

※カタログと実際の商品の色とは、撮影・印刷の関係で多少異なる場合があります。

※カタログ掲載商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更されることがあります。

**注意** 正しく安全にお使いいただくため、  
ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読み下さい。

株式会社トプ・コンメディカルジャパン

本社 〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1

営業本部 TEL.(03)5915-1803 仙台営業所 TEL.(022)722-0637 広島営業所 TEL.(082)294-8971

システム&サービス部 TEL.(03)5915-1803 横浜営業所 TEL.(045)949-3600 松山営業所 TEL.(089)969-1427

東京営業所 TEL.(03)6867-0123 名古屋営業所 TEL.(052)934-0761 福岡営業所 TEL.(092)483-3751

札幌営業所 TEL.(011)207-3250 大阪営業所 TEL.(06)7659-2904

TEL.(03)5915-1800

TEL.(082)294-8971

TEL.(089)969-1427

TEL.(092)483-3751

製造販売 株式会社トプ・コン 本社・アイケア国内営業グループ  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町75-1 TEL. (03)3558-2506  
ホームページ <http://www.topcon.co.jp>

株式会社 トプ・コンサービス  
〒174-8580 東京都板橋区蓮沼町 75-1(株)トプコン内 TEL.(03)3965-5491