

# Synergetics™ DDMS™ (Diamond Dusted Membrane Scraper) シリーズ



## シナジェティクスDDMS™シリーズの特徴

- ・ 先端のシリコン樹脂には細かいダイヤモンド研磨剤がついており、このことでILMやERMなどの薄い膜の端を剥離させることができます。
- ・ こうして剥離のきっかけができた膜は鑷子でストレスなく取り除くことができます。
- ・ 27gaの小切開硝子体手術に対応する27gaの品揃えもあります。
- ・ 先端をハンドルのレバーで出し入れできるリトラクタブルタイプもあります。

DDMS™はシナジェティクス社が開発した技術です。

株式会社モリアジャパンはシナジェティクスブランドの網膜硝子体手術器具の日本での独占販売を行っています。

**Moria**  
JAPAN

## WS-20.04.27 27ga Tano DDMS™ (滅菌済)\*

NEW

- ・ 27gaの小切開硝子体手術にも対応可能です。
- ・ 先端部を剥離しようとする膜の端に軽く触れて動かすことで、膜の端を浮かせ剥離することができます。
- ・ 25ga (WS-20.04.25S) と23ga (WS-20.04.23) の品揃えもあります。


\*本製品は滅菌済製品でシングルユースです。再滅菌はできません。



## WS-20.16.25 25ga Tano リトラクタブルDDMS™ (滅菌済)\*

- ・ レバーを先端に向かって押すことで、先端部をシャフトに格納することができます。
- ・ 先端部の原理は通常のDDMSと同じです。
- ・ 23ga (WS-20.16.23) の品揃えもあります。

\*本製品は滅菌済製品でシングルユースです。再滅菌はできません。

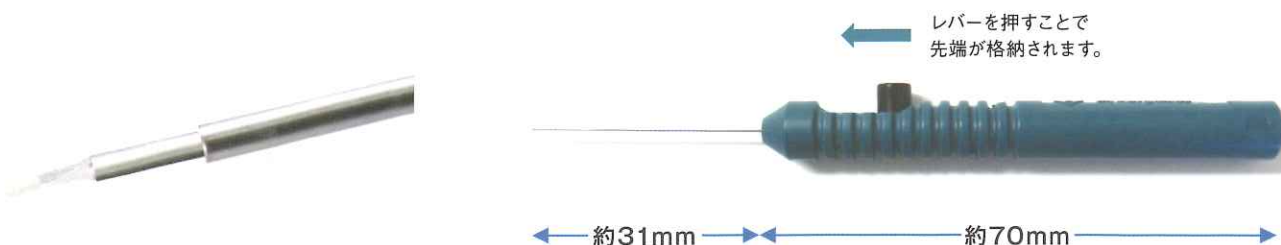

包装:5本/箱

医療機器認証番号:227ADBZX00001000

**Moria**  
JAPAN

株式会社 **モリア ジャパン**

〒101-0041

東京都千代田区神田須田町1-12-3 アルカディアビル6F

TEL:03-6260-8309/FAX:03-6260-8310

<http://www.moriajapan.com>

S2019007-2