




創業感謝祭

開催期間

2025 10.1 (Wed) 12.31 (Wed)

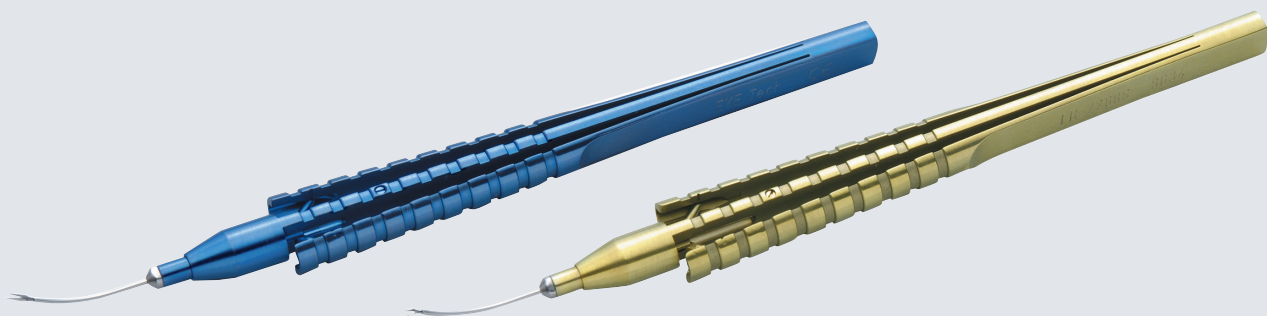

Message

「創造」をつないで40年 皆様のご支援に 感謝をこめて

エムイーテクニカは、1985年の会社創立以来「創造をつなぐ」という理念のもと、独創的なアイデアを基に生まれた欧米の眼科医療機器を日本の医療施設に紹介してまいりました。そして、メーカーとドクター双方の創造をつなぎ、更なる創造を具現化する製品の開発にも携わり、医療の質の向上に貢献してまいりました。


お陰さまでエムイーテクニカは2025年に創業40周年を迎えました。私たちはこれまで以上に、専任のスタッフによる徹底した品質管理と確かな製品知識で「医療機関に信頼と安全を提供する」ことを使命として、医療の発展の一翼を担い、広く社会に貢献する企業を目指してチャレンジしてまいります。

引き続き、皆様のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

エムイーテクニカ 社員一同

信頼のパートナーシップ

エムイーテクニカが築いてきた、欧米の一流医療機器メーカーとのパートナーシップ。日本における販売窓口としての信用と実績が、その絆をより強いものにしています。

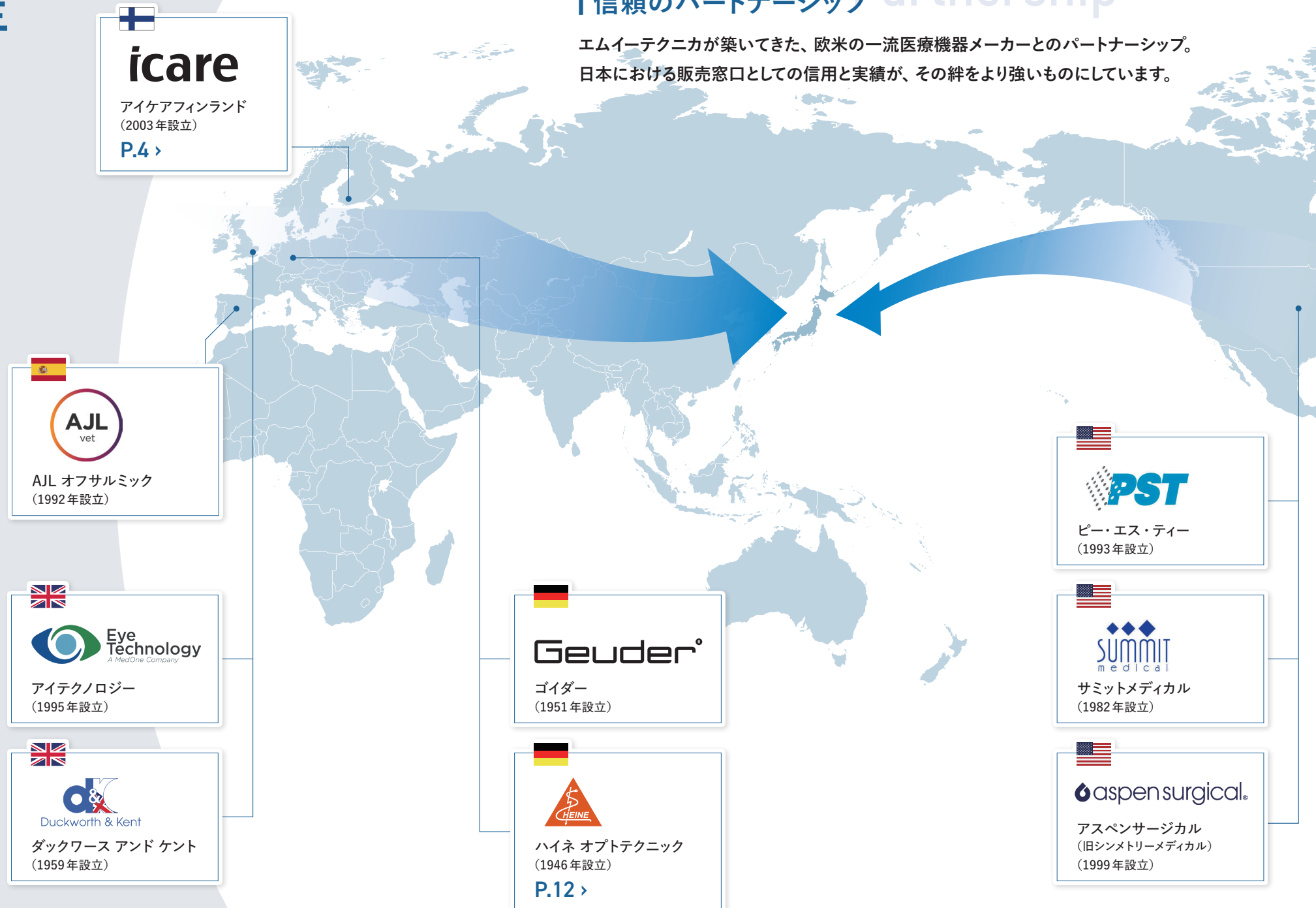

icare アイケアフィンランド


2003年、アイケアフィンランド社は革新的な特許技術リバウンドテクノロジーを搭載した、TA01 アイケア手持眼圧計を発売いたしました。

以来、医療現場の様々なニーズに応えるべく進化を続け、現在までに100を超える国々で、累計100,000台以上を販売し、信頼と実績を積み重ねてまいりました。

日本では2005年の発売より多くのユーザーにご愛用いただいています。



製品のあゆみ

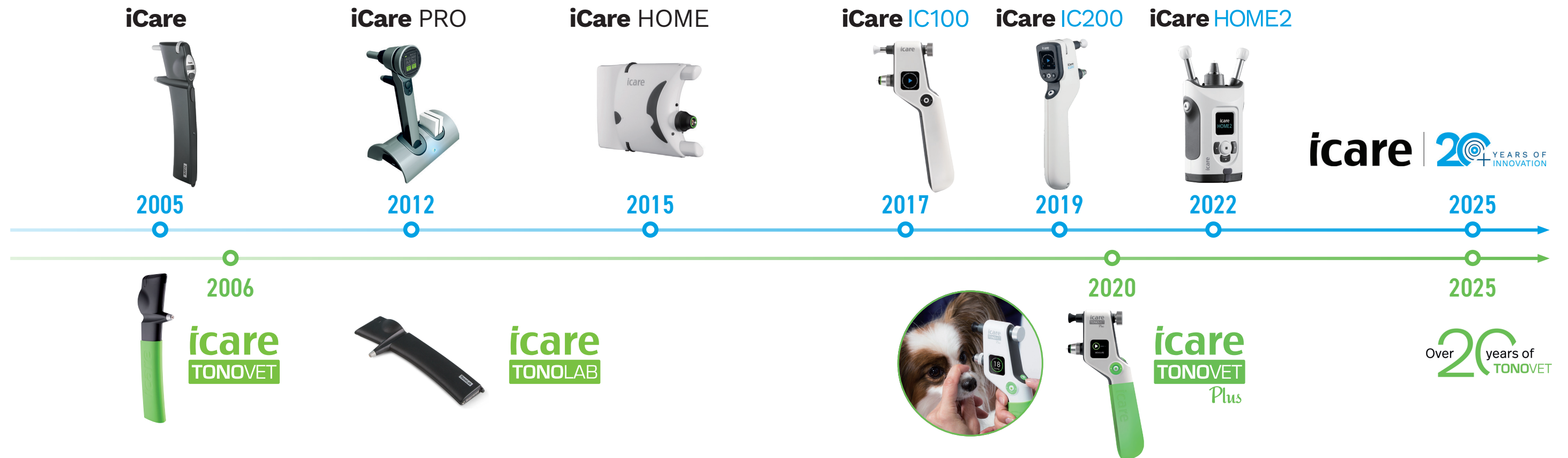

信頼性と使いやすさの追求 アイケア手持眼圧計が選ばれる理由

信頼性の高い測定結果

プローブが角膜に接触し反跳する瞬間的な動きをコイルセンサーが感知、解析して眼圧値を算出します（リバウンド式）。キャリブレーションは不要です。



点眼麻酔不要

清潔なディスポーザブルプローブは、直径1.7mmと極小で、子供や眼裂の狭い患者さんの測定も容易です。プローブの角膜への接触は一瞬で痛みもないため、点眼麻酔は不要です。




場所や人を選ばず測定が可能

軽量でコンパクトな本体は、外来から病棟への移動や往診時の持ち運びが容易です。また、乳幼児や車椅子の患者さんの測定など、幅広くご使用いただけます。



品質を支えるサービス体制

アイケア手持眼圧計は精密な測定器です。専門知識を身につけた専任スタッフが、製品の精度と信頼性を確保します。

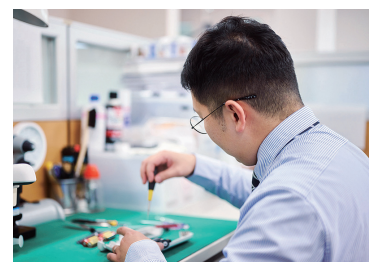



icare IC100

TA011 アイケアIC100 手持眼圧計
見やすいディスプレイ、わかりやすい測定サポート。連続測定モード搭載で操作性が向上しました。





icare IC200

TA031 アイケアIC200 手持眼圧計
アイケア手持眼圧計の最上位モデル。下方200°の範囲で測定可能です。座位・仰臥位・ベッドにもたれた姿勢にも対応します。





icare TONOVET Plus

TV011 トノベツPlus 手持眼圧計
犬・猫・ウサギ・馬に対応したモードを搭載。種別に対応した、正確な眼圧測定が可能です。





ディスプレイ用 プローブ (100本入)
TA011-1 アイケアIC100用
TA031-1 アイケアIC200用
TV011-1 トノベツPlus用
プローブは個包装されています。感染症や微生物汚染の心配はありません。



卓上・壁掛けスタンド
TA650 IC100/トノベツPlus用(黒)
TA670 IC200用(白)
アイケア手持眼圧計とプローブを安全に保管します。

キャンペーン特別セット

	- 本体 - プローブ - スタンド 	- 本体 - プローブ 	- 本体 - スタンド 
icare IC100 TA011 	[TA011-CA] TA011 TA011-1 TA650  ～¥940,000 ¥658,000 30% OFF	[TA011-CP] TA011 TA011-1 ～¥912,000 ¥656,640 28% OFF	[TA011-CS] TA011 TA650 ～¥918,000 ¥660,960 28% OFF
icare IC200 TA031 	[TA031-CA] TA031 TA031-1 TA670  ～¥1,440,000 ¥1,008,000 30% OFF	[TA031-CP] TA031 TA031-1 ～¥1,412,000 ¥1,016,640 28% OFF	[TA031-CS] TA031 TA670 ～¥1,418,000 ¥1,020,960 28% OFF
icare TONOVET Plus TV011 	[TV011-CA] TV011 TV011-1 TA650  ～¥890,000 ¥623,000 30% OFF	[TV011-CP] TV011 TV011-1 ～¥862,000 ¥620,640 28% OFF	[TV011-CS] TV011 TA650 ～¥868,000 ¥624,960 28% OFF

自己測定用モデルのご案内





icare HOME2

TA023 アイケアHOME2 手持眼圧計
進化した自己測定用モデル。椅子やソファに座った状態や、ベッドに寝た姿勢でも測定できます。クラウドでの眼圧値データ保存も可能で、患者さんの日内変動モニタリングに有用です。



Ti
Titanium

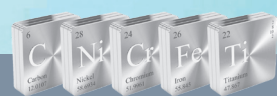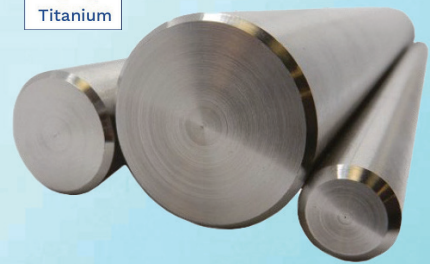

01

選び抜かれた材質

手術器具に適した生体適合性と強度と軽さを兼ね備えたチタニウム。マイクロサージェリー器具に最適な素材です。
(Duckworth&Kent社・Eye Technology社)

高度な加工技術

最新のNC旋盤が数値に従って精緻に器具を加工します。熟練の技術者の入念なチェックにより出荷の判定が行われます。

02



愛される形状

マイクロサージェリー器具に求められる、機能性と操作性を融合させたエルゴノミックデザインは、多くのドクターに愛されています。

03



Geuder®



すべてのドクターへ高品質な製品を エムイーテクニカの マイクロサージェリー器具が 選ばれる理由

アイデアを形にした オリジナル製品

メーカーとドクターの創造をつなぎ、医療の進歩に貢献する多くの製品を生み出してきました。

04



幅広いラインナップ

定番の器具から最新の術式に対応した器具まで、3000種類を超える多様な製品を製造し、世界100カ国以上に販売しています。
(Geuder社)

05





社内での チェック体制

エムイーテクニカでは専任のスタッフが、入荷したすべての製品をチェックしています。より高い品質基準を課すことで、医療機関に安心と安全をお届けします。

06




1:1
scale

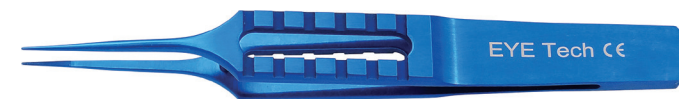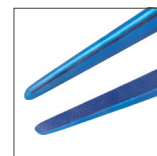

F-2010 ET縫合鑷子
F-2010G ET縫合鑷子 ゴールド

指に馴染むフラットハンドル。10-0の糸をしっかりと把持します。

¥53,000 > ¥31,800 40% OFF

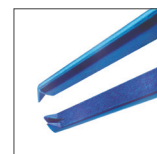

F-2012 ET角膜/縫合鑷子 0.12mm歯
F-2012G ET角膜/縫合鑷子 0.12mm歯 ゴールド

角膜把持用の鉤と縫合用のプラットフォームがついたマイクロ鑷子。マイクロサージェリー全般に使用できる汎用性の高い製品です。

¥56,000 > ¥33,600 40% OFF



FR-2268S 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G アングルド ショートハンドル
FR-2268 池田氏マイクロカプスロレキ西斯鑷子 23G アングルド

全囊に垂直に対峙するアングルチップを搭載したベストセラーモデルです。独自のショートシャフトとショートハンドルが、より確かで安定した操作感をもたらします。


¥180,000 > ¥117,000 35% OFF



FR-2278S 八重剪刀® 23G 2.7mm垂直刃 ショートハンドル
FR-2278 八重剪刀® 23G 3.2mm垂直刃

瞳孔拡大時の虹彩切開に最適な剪刀で、浅前房、奥眼、虹彩後癒着などの難症例にも安全に対処することができます。ハンドルの持ち手に対して刃が垂直に向いているため極めて自然な操作感が得られます。サイドポートからの挿入により12時部の虹彩や全囊の切開も容易に行え、粘弾性物質の漏れも最小に抑えます。

¥190,000 > ¥123,500 35% OFF

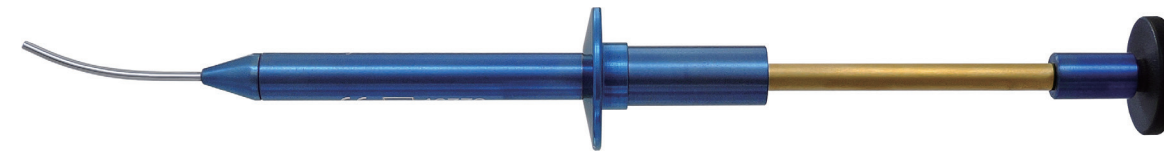


I-9006 カプセルテンションリング インジェクター 18G

インジェクターはバネの作用により滑らかに作動します。押し出すスピードをコントロールしながらカプセルテンションリングを安全に囊内にセットします。

¥94,000 > ¥65,800 30% OFF

専用滅菌トレーのご紹介

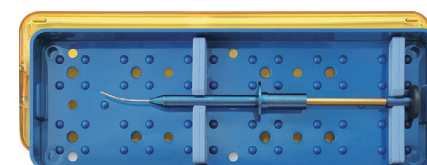

M-2701S 硝子体器具用滅菌トレー 1本用/小スロット 190×64×19

デリケートなチップを安全に保護します。

¥10,500 > ¥7,350 30% OFF

※当キャンペーン価格はI-9006とのセット販売のみの価格となります。





オベ動画を
いただけます▶

FR-2273 太田氏IOL強膜内固定用鑷子 25G

強膜創より挿入してIOL支持部先端を把持し眼外へ引き出します。
シャフトが短くカーブしているため、前房内操作がスムーズに行えます。


¥190,000 ▶ **¥133,000** 30% OFF





F-2056 ボーブル氏睫毛鑷子

13mmに伸びた大きめのチップが睫毛や瞼縁をしっかりと
らえてスムーズに抜去します。60°の先端傾斜により視界を
遮らず、処置部位の確認がしやすいデザインです。

¥43,000 ▶ **¥31,390** 27% OFF

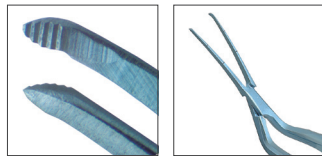

セレイテッドチップ

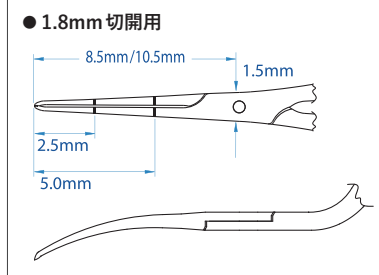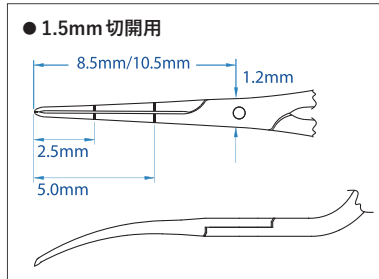

2-716GNE 稲村氏カプスロレキシス鑷子 8.5mm 1.5mm切開用 E ●
2-716GNR8E 稲村氏カプスロレキシス鑷子 8.5mm 1.5mm切開用 ラウンドハンドル E ●

¥140,000 ▶ **¥102,200** 27% OFF ※ハンドルの形状を色分けしております。

2-716GE-1 稲村氏カプスロレキシス鑷子 10.5mm 1.8mm切開用 E ●
2-716GER8-1 稲村氏カプスロレキシス鑷子 10.5mm 1.8mm切開用 ラウンドハンドル E ●
2-716GER8-2 稲村氏カプスロレキシス鑷子 8.5mm 1.8mm切開用 ラウンドハンドル E ●

¥120,000 ▶ **¥87,600** 27% OFF ※ハンドルの形状を色分けしております。

2016年にフルモデルチェンジした「稲村氏マイクロカプスロレキシス鑷子」。滑らかに加工されたハンドルの
把持部に刻まれた立体的な幾何学模様が、絶妙なフィット感で手に馴染みます。
凸凹に加工されたチップは小さなハンドル操作でしっかりと前囊を捉えます。

専用滅菌トレーのご紹介





**M-2610A カプスロレキシス鑷子・インジェクター用
滅菌トレー 152×64×32**

カプスロレキシス鑷子のチップ先端がトレーに触れないよう、深底のト
レーにチップを上に向けて収納します。フタに取り付けられたシリコンパ
ーが鑷子をしっかりと固定します。

¥7,800 ▶ **¥5,694** 27% OFF



※当キャンペーン価格は上記稲村氏鑷子とのセット販売のみの価格となります。

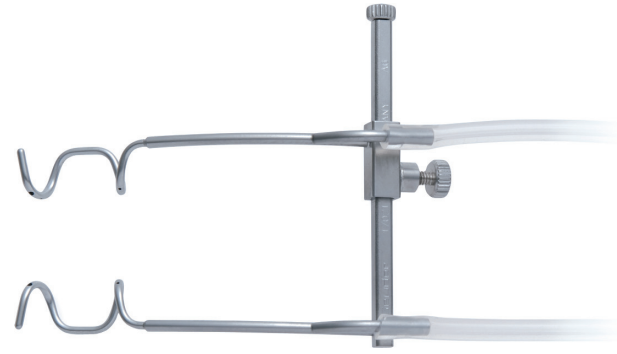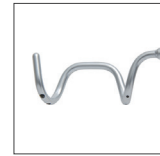

G-17021 野田氏吸引式開瞼器 12mm 丸孔

12個の吸引孔より連続的に水を吸引するため、常に良好な術野が得られます。
開瞼部はオープンでハンドピース操作時の妨げになりません。



¥130,000 ▶ **¥97,500** 25% OFF

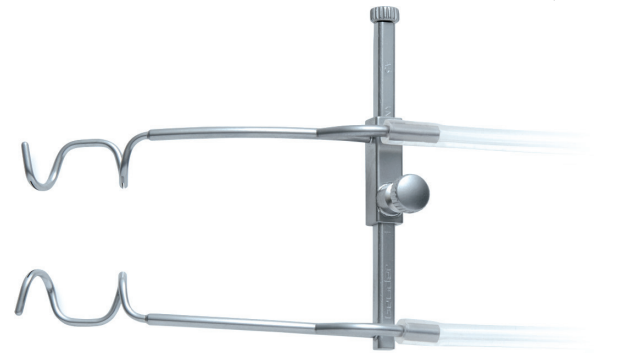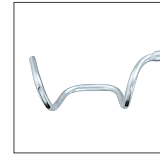

G-17024 古賀・野田氏吸引式開瞼器 12mm スリット孔

吸引孔がスリット状になり、より効率的に吸引ができるようになりました。液面
の上昇につれ吸引速度が増すという、ベルヌーイの定理を取り入れた開瞼器です。

¥155,000 ▶ **¥116,250** 25% OFF

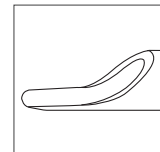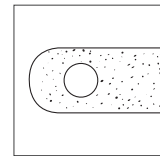

G-22100 吸引ハンドピース 0.3mm ポリッシャー付 22G
G-22101 灌流ハンドピース 22G

I/Aハンドピースの代わりに左右のポートから挿入して吸引・灌流操作を行います。
12時方向の皮質吸引が容易で後囊研磨も行えます。

¥79,000 ▶ **¥59,250** 25% OFF



6-090-7



6-090-8



▲オベ動画を
いただけます

6-090-7 太田・ラナ氏多目的核分割ディバイダー 1.75mm
6-090-8 太田・ラナ氏多目的核分割ディバイダー 1.42mm

太田・ラナ氏多目的分割ディバイダー（Jチョッパー）は、核分割だけでなく核の回転や小瞳孔時の虹彩操作
など、白内障手術における様々な用途で使用することを目的として開発されました。先端の2本の突起により、
核の硬度にかかわらず核への刺入が容易で、フェイコチョップ法やDivide and Conquer法のいずれの手法
にも対応した核分割が行えます。

¥42,000 ▶ **¥29,400** 30% OFF





HEINE QUALITY
MADE IN GERMANY

ハイネ オプトテックニク

高品質の製品をお届けします



品質へのこだわり

ハイネ社のレンズは、熟練技術者の専門的な知識と最新の生産技術が融合して生み出されています。レンズの多くは $\pm 0.0001\text{mm}$ の精度で製造されており、これは人間の髪の毛の直径の20分の1です。



品質管理

すべての製品は、数十年にわたる製品開発、継続的な改善、および自社施設での徹底した品質管理の結果、非常に高い品質を保っています。すべてはハイネ社の指針である「可能な限り早期に正確な診断を行う」を可能にするためです。



品質の再生

製品を末永くお使いいただくため、専任の技術者がメンテナンスや修理を行います。高い安全性が求められる医療機器を安心してご使用いただける体制が整っています。



ミニC LED エグザミネーションライト



D-008.73.109

ミニC LED エグザミネーションライト 【単4電池×2】

- 重量：22g (乾電池含まず)
- サイズ：20mm (W) × 118mm (H)

¥13,500 > **¥9,450** 30% OFF

3個以上購入

¥13,500 > **¥8,775** 35% OFF



一度に
3点以上で

特別
価格

- | 明るくて均質な照明光
- | 手に馴染むグリップ形状
- | 診療科を問わない汎用性の高い製品

オメガ 600 LED 双眼倒像鏡

※今回は右記セット品番のみのご案内になります



M-008.600.81

オメガ600 LED 充電トランス+スタンドセット

[セット構成]

- オメガ600LED
- 充電トランス600
- ブラケット
- スタンド

¥773,500 > **¥580,125** 25% OFF

電源・調光・ビジョンブーストスイッチ

ビジョンブーストをONにすると、通常時の最大光量から、光量が245%UPします。(作業距離400mm)

リチウムポリマーバッテリー600 **Li POL**

新開発のリチウムポリマーバッテリーの重量は僅か21g。1.5時間の充電で、約4時間の連続使用が可能です。

[仕様]

照度(距離40cm)：560Lux(ブーストOFF時) / 1380Lux(ブーストON時)

連続使用時間：4時間(ブーストOFF時) / 1.5時間(ブーストON時)

色温度：3000Kelvin

重量：475g



M-008.600.82

オメガ600 LED ACアダプターセット

[セット構成]

- オメガ600LED
- ACアダプター

¥679,000 > **¥509,250** 25% OFF



C-002.14.602 HSL150ハンドヘルドスリットランプヘッド 3.5V

角膜、前房、虹彩、水晶体など前眼部の精密な検査に使用します。スリット光の幅や光量を調節して左右にスキャンしたり、観察部位の前後に焦点を合わせることで、より正確に病変の程度や位置を知ることができます。付属のフルオレsein検査用のコバルトブルーフィルターを使用して、角膜上皮障害や欠損の有無を観察することができます。

- スリット幅×長さ：0.2×10mm～4×14mm

¥188,000 > **¥131,600** 30% OFF



C-000.14.606 HSL ルーペアタッチメント 10倍

HSL ルーペアタッチメント 10倍

観察像を6倍から10倍に拡大します。

¥41,000 > **¥28,700** 30% OFF



C-002.17.080 フィノフ氏 LED トランスイルミネーターヘッド 3.5V

瞳孔検査や外眼部検査に使用します。フルオレsein検査用のコバルトブルーフィルターもオプションで用意されています。

¥26,500 > **¥18,550** 30% OFF

C-000.17.081 コバルトブルーフィルター (オプション)

¥4,700 > **¥3,290** 30% OFF



C-002.33.000 単眼倒像鏡ヘッド 3.5V

操作性に優れたコンパクトな製品です。コントロールスリーブの回転によりダイヤフラムが連続的に可変し、シャープな輪郭のスポット光を形成します。血管のコントラストを高めるレッドフリーフィルターの挿入もワンタッチで行えます。


¥167,000 > **¥116,900** 30% OFF



C-008.30.100 ベータ200 LED 直像鏡ヘッド 3.5V

小瞳孔眼においても照明光の入射が容易で、角膜や虹彩からの不快な反射光に影響されることなく広範囲に眼底を観察することができます。軽量で堅牢なアルミフレームに施された独自のダストブロー機構が、精密な光学部を塵や埃から守ります。レッドフリーフィルターレバー搭載。

¥110,000 > **¥77,000** 30% OFF

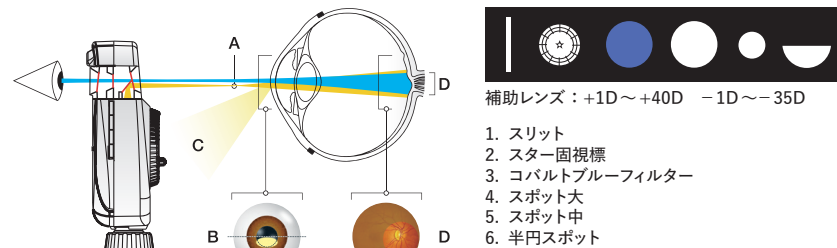

ハインネ非球面光学システム

ハインネ独自の非球面光学システムが反射光を排除したグレアフリーの眼底観察を可能にしました。非球面光学システムにより形成された楕円の照明光 (A) は瞳孔領の下方 (B) より眼内に入射されます。角膜や虹彩から発生する僅かな反射光 (C) は、角膜のカーブにより下方に排除されます。楕円の照明光は眼内で大きなスポット (D) となり眼底を明るく広範囲に照射します。



ハイン社耳鏡の最上位モデルです。4種類のリューザブルスベキュラの他に2種類のディスポーザブルスベキュラが使用できます。

B-008.11.500 ベータ200 LED F.O.耳鏡ヘッド 3.0倍 3.5V

¥67,000 > **¥46,900** 30% OFF

B-008.11.400 ベータ400 LED F.O.耳鏡ヘッド 4.2倍 3.5V

¥78,000 > **¥54,600** 30% OFF



G-008.21.301

G100 LED スリットイルミネーションヘッド 1.6倍 3.5V

演色性に優れた LED 照明光と豊富なアクセサリが様々な部位の観察や処置に対応します。6種類のスベキュラを使用することができます。また、口径の大きな1.6倍ルーペは着脱可能で左右に大きく移動することができます。


¥72,000 > **¥50,400** 30% OFF

G-000.21.360

ロック式開閉スベキュラ 80mm

瞳鏡として使用します。

¥37,000 > **¥25,900** 30% OFF

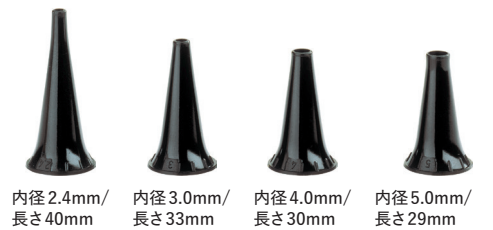

B-000.11.111

ベータ200/ベータ400 F.O.耳鏡スベキュラ4個入

134°Cのオートクレーブ滅菌が可能です。

¥4,400 > **¥3,080** 30% OFF



M-081.25.250

オールスペック ディスポーザブルスベキュラ

- 内径2.5mm/長さ35mm 250個入

M-081.40.250

オールスペック ディスポーザブルスベキュラ

- 内径4.0mm/長さ30mm 250個入

¥6,700 > **¥4,690** 30% OFF

B-000.11.128

オールスペック ディスポーザブルスベキュラ

- 内径2.5mm/長さ35mm 1000個入

B-000.11.127

オールスペック ディスポーザブルスベキュラ

- 内径4.0mm/長さ30mm 1000個入

¥20,000 > **¥14,000** 30% OFF



G-000.21.310 スベキュラ

- 内径2.2mm/長さ40mm

G-000.21.311 スベキュラ

- 内径2.8mm/長さ40mm

G-000.21.312 スベキュラ

- 内径3.5mm/長さ40mm

G-000.21.313 スベキュラ

- 内径4.5mm/長さ40mm

G-000.21.314 スベキュラ

- 内径5.5mm/長さ40mm

¥2,600 > **¥1,820** 30% OFF

134°Cのオートクレーブ滅菌が可能です。

「ベータ4スリム／スタンダード充電ハンドル」と「NT4充電器」の組み合わせで快適な操作環境が生まれます。

※ベータ4スリム充電ハンドルとベータ4スタンダード充電ハンドルは、NT4充電器以外では使用できません。



X-007.99.474 ベータ4スリム充電ハンドル 3.5V

軽量、コンパクトでフィット感に優れています。

- 連続使用時間：(LED) 約3時間 / (XHL電球) 約70分
- 充電時間：約3時間 ■ 重量：114g

¥62,000 > ¥43,400 30% OFF

X-002.99.484 NT4充電器 スリムハンドル用

¥76,000 > ¥53,200 30% OFF

最新のリチウムイオン充電電池を内蔵！

ニッケル水素充電電池と比べ、軽量でメモリー効果がほとんどありません。連続使用時間も長く、長寿命で経済的です。

電源スイッチの自動オン／オフ機能！

充電ハンドルのスイッチをオンのまま充電器に戻すとライトは自動的に消灯。充電器から外すと自動的に点灯します。オン／オフ操作は不要です。

左右独立した充電機能を備えた充電器！

青色のリング状のLEDが、充電中と充電完了を異なる発光パターンで知らせます。過充電防止の安全設計です。

X-007.99.396 ベータ4スタンダード充電ハンドル 3.5V

バッテリー残量を知らせるLEDインジケータを内蔵しています。

- 連続使用時間：(LED) 約9時間 / (XHL電球) 約3時間
- 充電時間：約2時間
- 重量：235g

¥55,000 > ¥38,500 30% OFF

X-002.99.494 NT4充電器

¥72,000 > ¥50,400 30% OFF

ハイネの喉頭鏡ハンドルとブレードは、ISO7376（グリーンスタンダード）適合品です。

※ハンドル・ブレード共に他社の同規格品と互換性があります。

獣医科専用

LED HQ

Green Standard

喉頭鏡ハンドル

メンテナンス性に優れたエルゴノミックデザイン。電池を取り出すことなく流水洗浄や浸漬消毒が可能。

F-008.22.820 喉頭鏡ハンドル【単2電池×2】

LED 喉頭鏡ハンドル イージークリーン 2.5V (重量 266g)

¥59,800 > ¥41,860 30% OFF

F-008.22.821 喉頭鏡ハンドル【単3電池×2】

スリム LED 喉頭鏡ハンドル イージークリーン 2.5V (重量 210g)

¥58,800 > ¥41,160 30% OFF

ウォータープルーフ機能

完全防水設計。分解不要で洗浄が可能です。(防水等級 IPX8)

Non-Slip "Wave Design"

波形のグリップはしっかりと握れて滑りにくいデザインです。


高輝度 LED

従来のハロゲンタイプに比べ、3 倍の明るさ。LED の質も向上しました。LED の寿命は 50,000 時間以上で、急な球切れの心配もほぼありません。

獣医科専用

ファイバーオプティックブレード

ブレード内部に設けられた光路（ファイバーオプティック）は、6500 本ものファイバーを高密度に束ねて形成され、優れた光透過性を実現しています。滑らかに仕上げられたブレード表面は生体に優しくメンテナンスや洗浄も容易です。ファイバー両端は精緻に加工され、4000 回を超えるオートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。

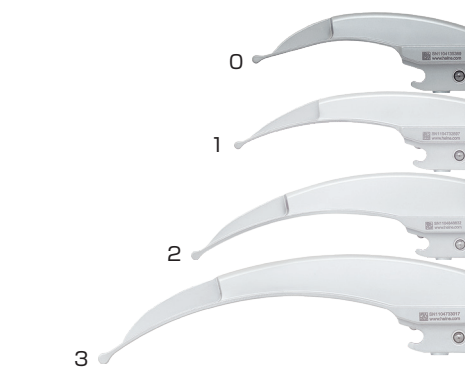

F-000.22.100 マッキントッシュブレード 0

- 長さ 82mm / 幅 9mm

F-000.22.101 マッキントッシュブレード 1

- 長さ 94mm / 幅 10mm

F-000.22.102 マッキントッシュブレード 2


- 長さ 114mm / 幅 14mm

F-000.22.103 マッキントッシュブレード 3

- 長さ 134mm / 幅 14mm

¥39,800 > ¥27,860 30% OFF

プラズマ、オートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。

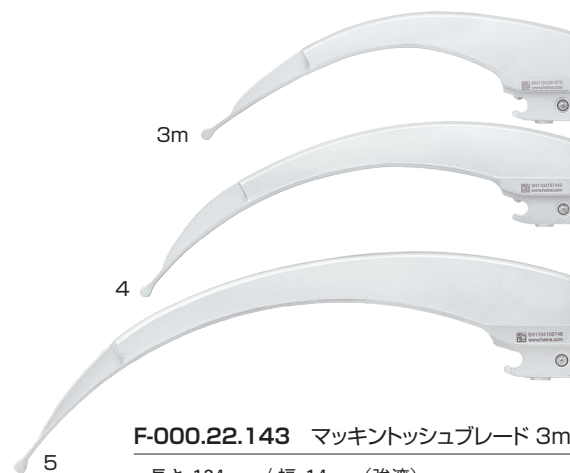

F-000.22.143 マッキントッシュブレード 3m

- 長さ 134mm / 幅 14mm (強湾)

¥39,800 > ¥27,860 30% OFF

F-000.22.104 マッキントッシュブレード 4

- 長さ 155mm / 幅 15mm

¥42,000 > ¥29,400 30% OFF

F-000.22.105 マッキントッシュブレード 5

- 長さ 177mm / 幅 15mm

¥46,000 > ¥32,200 30% OFF


プラズマ、オートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。



マッキントッシュ断面図

ミラー断面図

ハイン断面図

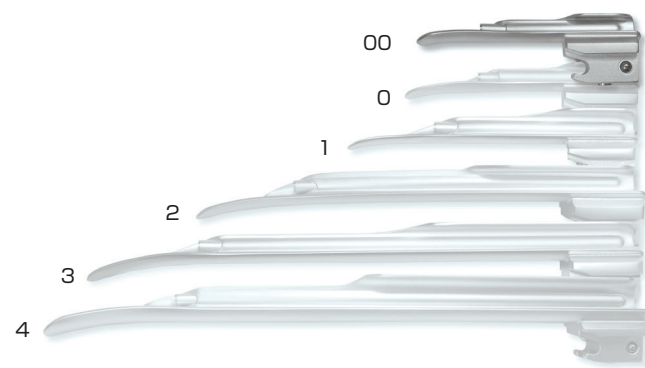

F-000.22.119 ミラーブレード 00

- 長さ 76mm / 幅 10mm

¥45,000 > ¥31,500 30% OFF

F-000.22.120 ミラーブレード 0

- 長さ 80mm / 幅 11mm

F-000.22.121 ミラーブレード 1

- 長さ 100mm / 幅 12mm

F-000.22.122 ミラーブレード 2

- 長さ 152mm / 幅 13mm

¥42,000 > ¥29,400 30% OFF

プラズマ、オートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。

F-000.22.123 ミラーブレード 3

- 長さ 192mm / 幅 13mm

¥44,000 > ¥30,800 30% OFF

F-000.22.124 ミラーブレード 4

- 長さ 207mm / 幅 16mm

¥47,000 > ¥32,900 30% OFF

プラズマ、オートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。

F-000.22.110 ハイネ ショートブレード 0

- 長さ 82mm / 幅 12mm

F-000.22.111 ハイネ ショートブレード 1

- 長さ 95mm / 幅 13mm

¥43,000 > ¥30,100 30% OFF

プラズマ、オートクレーブ滅菌（134℃/4 分）が可能です。



収納セット

使用頻度の高いショートサイズのマッキントッシュブレード4本とハンドルをジッパーケースに収納したセットです。

M-228.18.820

マッキントッシュブレードLED
喉頭鏡ハンドル イージークリーンセット
2.5V【単2電池×2】

〔セット構成〕

- マッキントッシュブレード1, 2, 3, 4
- LED 喉頭鏡ハンドル イージークリーン
- 収納ケース

¥238,700 > ¥167,090 30% OFF

M-228.18.821

マッキントッシュブレードスリム LED
喉頭鏡ハンドル イージークリーンセット
2.5V【単3電池×2】

〔セット構成〕

- マッキントッシュブレード1, 2, 3, 4
- スリム LED 喉頭鏡ハンドル イージークリーン
- 収納ケース

¥237,700 > ¥166,390 30% OFF

医療の発展の一翼を担い、広く社会に貢献する 企業を目指してチャレンジしてまいります。



1985
Geuder社と取引開始



1986
HEINE社と取引開始




1989
D&K社と取引開始

1985


1986
日本眼科医療機器協会入会

1985
株式会社エムイーテクニカ創立

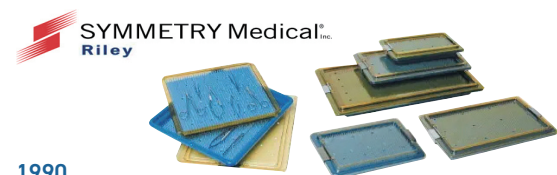

1990
Symmetry Medical社と取引開始(現: Aspen Surgical社)

1993
HEINE社のオメガシリーズがグッドデザイン賞を受賞

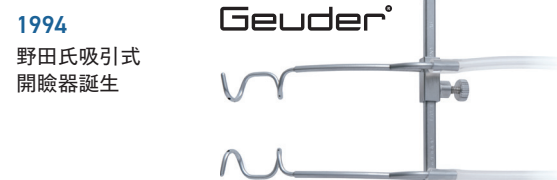

1994
野田氏吸引式
開瞼器誕生



1995
稲村氏カプスロレキス
鑷子誕生



1995
PST社と取引開始



1998
Eye Technology社と
取引開始



1999
池田氏マイクロカプスロレ
キス鑷子誕生

1996
獣医科分野に参入

1992
大阪営業所開設

2000



2002
八重剪刀®誕生



2005
Icare Finland社と
取引開始

2001
本社ビル落成



2006
札幌営業所開設

2010

2010
福岡営業所開設



2012
Summit Medical社と取引開始



2019
METORI-50販売開始

2018
大阪営業所新社屋落成



2025
本社新社屋落成予定(12月)



2022
アイケア HOME2販売開始



2024
眼洗浄用モーガンレンズ販売開始




2024
AJL社と取引開始

2023
名古屋営業所
開設

2022
仙台営業所
開設

2025



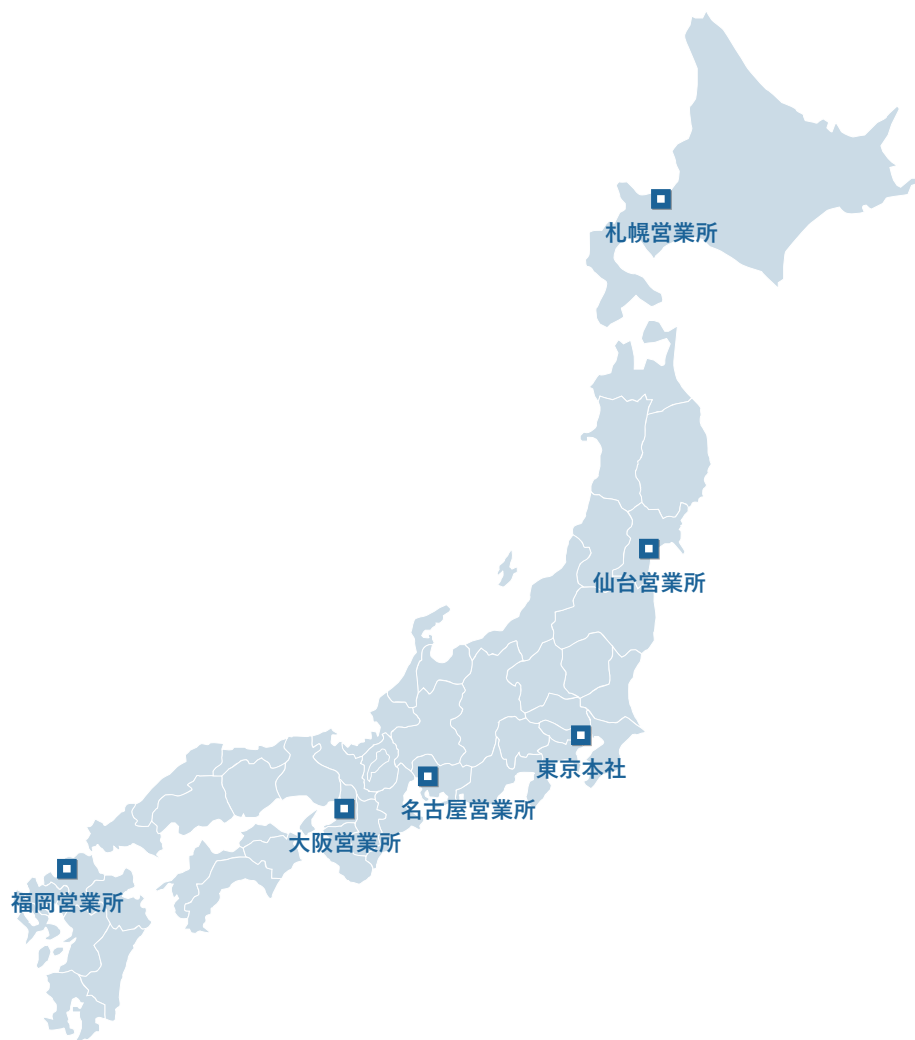

株式会社エムイーテクニカ

東京本社	〒170-0002	東京都豊島区巣鴨1-34-4	TEL: 03-5395-4588	FAX: 03-5395-4866
札幌営業所	〒007-0884	北海道札幌市東区北丘珠4条1-20-2	TEL: 011-792-6522	FAX: 011-792-6522
仙台営業所	〒981-3133	宮城県仙台市泉区泉中央1-9-2 203	TEL: 022-739-7975	FAX: 022-739-7976
名古屋営業所	〒464-0858	愛知県名古屋市千種区千種1-10-20 101	TEL: 052-890-5565	FAX: 052-890-5575
大阪営業所	〒533-0012	大阪府大阪市東淀川区大道南3-2-12	TEL: 06-6829-7912	FAX: 06-6829-7922
福岡営業所	〒812-0004	福岡県福岡市博多区榎田1-8-28	TEL: 092-432-3740	FAX: 092-432-3741



公式ホームページ

<https://www.metechnica.co.jp>

※製品の仕様および価格は予告なく変更することがあります。